

VEGAS
COSMETICS

BODY FORMER
Waterproof



INNOVATIVE BODY MODELLING CONCEPT

USER MANUAL

Advertencias	02
Especificaciones de Body Former	03
Preparación/Cuidados	04
Modo de utilización	04
Funciones y programas	05
Pasos para un tratamiento eficaz	07
Movimientos	07

INFORMACIONES PARA LA CORRECTA UTILIZACIÓN DEL BODY FORMER

Le agradecemos que haya adquirido nuestro equipo Body Former. Le deseamos grandes momentos de bienestar y belleza con Body Former.

Body Former ha sido desarrollado exclusivamente para tratamientos de belleza y estética que podrán realizarse en la comodidad de su hogar. Body Former no se destina a tratamientos médicos o de enfermedades. Vegas Cosmetics no se responsabiliza de daños causados por una utilización contraria a las funciones descritas en este manual.

Antes de utilizar Body Former, lea este manual con atención. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con su consejero Vegas Cosmetics o directamente con nuestros servicios. Guarde este manual en un lugar seguro para poder consultarlo las veces que fuera necesario.

Utilice Body Former únicamente con los productos de cosmética mencionados en este manual.



CONTROL DE CELLULITE

Loción anticelulítica y liporredutora con efecto calor que reduce las marcas de la celulitis. Un conjunto de valiosos principios activos lipolíticos favorece, de forma eficaz, la eliminación de las grasas acumuladas en la piel y estimula su absorción. El efecto calor ayuda a movilizar y a eliminar los lípidos de forma natural. Además, contiene principios activos reafirmantes que ayudan a la tonificación de la piel tras la eliminación del tejido adiposo. Aplicación: aplicar diariamente en las zonas afectadas y masajear bien. Podrá sentir una ligera sensación de calor acompañada de un ligero hormigueo y mostrar un color rojizo pasajero. Lavarse bien las manos tras la aplicación. Ideal para aplicar tras tratamientos con el Vegas Body Former o de manera individual.



FORMING GEL

Gel conductor con efecto liporredutor y anticelulítico especialmente desarrollado para aplicación con el Vegas Body Former. Valiosos principios activos, como la cafeína y el yodo orgánico, estimulan la acción lipolítica y termogénica mientras que el Aloe Vera hidrata y tranquiliza la piel. Potencia activamente los efectos del Vegas Body Former. Aplicación: durante el masaje, aplicar de forma abundante con el Body Former. Repetir siempre que sea necesario, durante el tratamiento.



En los días en que no utilice el Forming Gel puede utilizar el Cellulite Control.

ADVERTENCIAS

Lea atentamente las informaciones antes de usar el Body Former. Las instrucciones de seguridad deben utilizarse al usar este aparato:

1. Para piel sensible, la primera aplicación debe ser de corta duración.
2. Ejecute el tratamiento en un lugar seguro. Compruebe que el aparato se encuentra seguro; si se cae al agua, no le toque hasta que esté desenchufado.
3. Use solamente el cargador original para cargar el dispositivo.
4. El aparato no debe utilizarse si se ha roto o si se ha caído. No funcionará correctamente en estas condiciones.
5. No debe utilizar el aparato si está embarazada, en periodo de lactancia, con la menstruación, si sufre epilepsia, enfermedades cardíacas, si es portador de Pacemaker, de prótesis metálicas o del dispositivo intrauterino (si realiza cavitación en el abdomen).
6. No utilice el aparato en los labios, ojos, garganta o una zona corporal en que haya sufrido intervención quirúrgica.
7. El Body Former se destina a utilizarse en una piel saludable.
8. Si se siente mal durante el procedimiento, pare de inmediato el tratamiento. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros un médico.



Informaciones importantes de seguridad




No intente desmontar el aparato




Mantener fuera del alcance de los niños




Mantener alejado de fuentes de calor

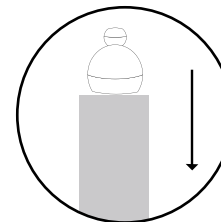

Mantener en lugar seco

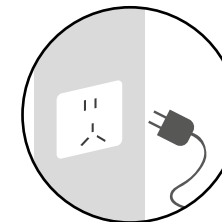


Mantener en lugar seguro

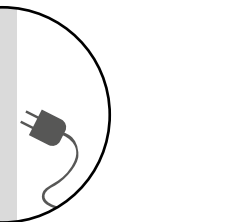


No utilice ningún cargador, salvo aquel que viene con el aparato

ESPECIFICACIONES DE BODY FORMER


EL APARATO:

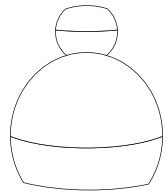

(Parte frontal)

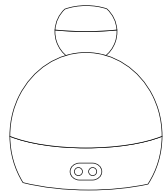

(Parte posterior)

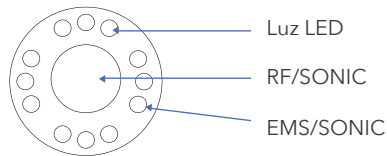


Luz LED

RF/SONIC

EMS/SONIC

PANTALLA Y FUNCIONES

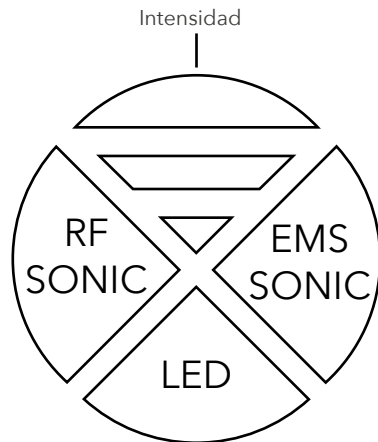

PREPARACIÓN Y CUIDADOS CON EL BODY FORMER

PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAVITACIÓN:

Sitúe el aparato en una superficie plana y salpíquele algunas gotas de agua sobre el aplicador.

Conecte el dispositivo, presionando el botón ON/OFF y, a continuación, presione el botón CAVI para activar el ultrasonido. Ahora, escoja la intensidad que quiere (low-baja; high-alta).

Cuando las gotas de agua vibren, el ultrasonido estará funcionando correctamente.

PROBAR LA PIEL PARA ALERGIAS:

Probar en la muñeca con la piel bien limpia

Aplicar el producto de tratamiento (Forming Gel) y observar las reacciones de la piel. Si comprueba alguna reacción desagradable durante esta prueba, interrumpa de inmediato el tratamiento.

Si no siente ninguna reacción desagradable puede utilizar el dispositivo de inmediato y el producto de tratamiento.

Si en cualquier momento de la utilización siente alguna incomodidad o reacción alérgica interrumpa de inmediato el tratamiento.

MODO DE UTILIZACIÓN

ON/OFF:

Presione la función deseada y el dispositivo se encenderá. Para apagar presione cualquier botón del dispositivo

SELECCIONAR PROGRAMA:

Presione la función deseada, agregando la función de Fototerapia (LED = luz rojo) al tipo de tratamiento deseado.

La función activa se identifica en la pantalla mediante la iluminación de los botones.

Para activar la función de Fototerapia, simplemente presione el botón LED

NIVEL DE INTENSIDAD:

La selección del nivel está disponible para RF, CAVI y EMS. Le patrón es el Nivel 1. Cada vez que presione el botón de la función pretendida, la intensidad se aumenta.

La secuencia es la siguiente:

Level 2 -> Level 3 -> Volver al Level 1

CARGAR

Cargue el dispositivo por lo menos tres horas antes del primer tratamiento para activar la batería.

Vacío: cuando la batería se vacía, el dispositivo emite una señal sonora 10 veces y después se apaga.

Al cargarlo: cuando el dispositivo está conectado al soporte de carga, el indicador de batería parpadea.

Carga concluida: cuando se completa la carga, la pantalla de carga dejará de parpadear y la carga estará completa.

Tiempo de carga	Tiempo de funcionamiento
aproximadamente 3 horas	aproximadamente de 2 hora y media

FUNCIONES Y PROGRAMAS

ESTE DISPOSITIVO SE UTILIZA PARA:

- Reducción lipídica (grasa)
- Reducción de celulitis y arrugas
- Tonificar y reafirmar la piel
- Reducción de impurezas e inflamaciones

RADIOFRECUENCIA (RF)

La radiofrecuencia es un tratamiento estético utilizado en el combate a la flacidez del rostro o del cuerpo, y es muy eficaz para eliminar arrugas, líneas de expresión, incluso la grasa localizada y también la celulitis, y es un método seguro con efectos duraderos.

El aparato de radiofrecuencia aumenta la temperatura de la piel y del músculo a aproximadamente 41 °C y esto contrae el colágeno existente y aumenta la producción de fibras, colágeno y elastina, y le proporciona más sujeción y firmeza a la piel. Además, el aumento de la temperatura rompe las membranas de las células grasas, y hace que la grasa se elimine del cuerpo. Los resultados pueden observarse, tras las primeras aplicaciones, y serán progresivos conforme a la frecuencia de los tratamientos.

CAVITACIÓN (SONIC)

La cavitación es un método no invasivo que permite modelar el cuerpo eficazmente y con resultados visibles desde la primera sesión.

Cuando la grasa localizada no se consigue eliminar con dieta, ejercicio físico o tratamientos, la cavitación es la solución para perder grasa localizada de forma eficaz. La cavitación actúa en los depósitos grasos localizados, y hace que esta sea eliminada por el sistema linfático. Este método evita el recurso a una cirugía estética.

Cuando las ondas ultrasónicas de baja frecuencia alcanzan un tejido, concretamente el adiposo, provocan la pérdida de grasa localizada. Las ondas ultrasónicas «fragmentan» las membranas celulares y liberan la grasa que será eliminada a través del sistema linfático.

EMS (Electrical Muscle Stimulation)

Es un procedimiento que utiliza corrientes eléctricas para el tratamiento de la flacidez de los tejidos, tonificación muscular y drenaje linfático.

La electroestimulación provoca contracción muscular, aumenta la circulación sanguínea, mejora la oxigenación celular y elimina las toxinas.

FOTOTERAPIA

Luz roja: estimula la producción de colágeno y elastina natural y mejora la circulación sanguínea. La piel gana significativamente elasticidad y suavidad.



En cualquiera de los tratamientos podrá añadir Fototerapia con luz roja. Puede utilizar la Fototerapia como un tratamiento.

PASOS PARA UN TRATAMIENTO EFICAZ

1. Limpiar la piel;
2. Aplicar una cantidad abundante de Forming Gel en la zona que hay que tratar y en el aplicador del Body Former;
3. Seleccionar el programa, la intensidad que se quiere e iniciar el masaje conforme a las imágenes;
4. Poner más producto conforme vaya siendo necesario durante el proceso de masaje;
5. Una vez se ha finalizado el tratamiento retirar los excesos del producto (Forming Gel);
6. Aplicar la loción Celulite Control con las manos y dejar que se absorba.

RECOMENDACIÓN
Duración del tratamiento: 20 min 3x por semana en días intercalados

! Para su seguridad el Body Former está programado para 10 min. por ciclo.

MOVIMIENTOS

Para alcanzar mejores resultados, siga las siguientes indicaciones:

1- BRAZOS

Inicie con movimientos rotativos en los codos hasta las axilas.

2- PECHO

Aplique el producto uniformemente en el pecho (ver foto 1). Mueva el Body Former como se indica en la Foto 2.

No realice tratamiento en los pezones, ¡protéjalos!

3- CINTURA Y BARRIGA

Masajear la cintura de arriba abajo y de afuera hacia adentro. En movimientos rotativos masajee alrededor del ombligo. Realice movimientos grandes y circulares bajo el ombligo.

4- PIERNAS

Inicie en la rodilla con pequeños movimientos circulares hasta arriba.

5- CADERA/GLÚTEOS

Masajear desde abajo hacia arriba, para reafirmar y estirar la piel.

6- PIES

Movimientos en círculos en la planta del pie para aliviar retenciones de líquidos/hinchazones.



Foto 2

Foto 1

FICHA TÉCNICA

VEGASTRADE, LDA.
RUA NOVA DE NESPEREIRA, 8
4770-287 LAGOA
V. N. FAMALICÃO | PORTUGAL

TEL.: (+351) 252 302 100
FAX: (+351) 252 302 109

www.vegascosmetics.pt
geral@vegascosmetics.pt

Nombre del equipo: Body Former
Modelo Ref.: 470
Input (corriente de entrada): 110-240V
Output (corriente de la batería): 5V 1A
Batería 900 mAh lithium battery
Dimensiones (mm): 990 * 990 * 94
Frecuencia de cavitación: 800 KHz
Fototerapia: rojo
Tiempo de funcionamiento: se desconecta automáticamente tras 10 min de utilización

ES

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Modelo del producto:

Body Former

Fecha de la compra:

Lugar de la compra:

Consejero Vegas Cosmetics:

1. En improbable caso de que el equipo revele alguna avería o anomalía durante los primeros 24 meses, tras la fecha de la compra, Vegas Cosmetics le garantiza su reparación durante dos años.
2. En estos casos, devuélvale el equipo a nuestro consejero o directamente envíelo a nuestra dirección, junto con la respectiva factura y este certificado de garantía original.
3. Cualquier utilización contraria o adversa a las indicaciones contenidas en este manual anula el derecho de garantía.
4. Mala utilización o utilización inapropiada, tales como:
 - a. Intentar abrir el equipo
 - b. Daños causados debido a transporte inadecuado
 - c. Daños causados por caídas, manejo violento o daño de piezas o componentes del equipo
 - d. Esta garantía no cubre los daños causados por la exposición al agua/humedad y al exceso de temperatura.
5. El certificado de la garantía no se puede sustituir o reponer. Guárdelo en un lugar seguro.

VEGAS
COSMETICS

BODY  FORMER
Waterproof